

eScope

專業數碼顯微鏡

使用說明書

DP-M02

30萬像素
200倍放大倍率
TV輸出版本



佳駿(環球)有限公司
ORIENTAL INSPIRATION LIMITED

本說明書最終解釋權歸佳駿(環球)有限公司所有

感謝您選購本公司出品的“eScope”專業數碼顯微鏡。

為了保障本產品能在今后的工作中充分發揮其功能及延長其使用壽命,請在安裝使用前詳細閱讀此說明書,安裝使用過程中請注意產品的保養&保護。

基於產品不斷改進的需要,產品外觀\顏色\配件如有改動,請以實物為準;若產品技術改進,本公司將保留對產品技術更新及此說明書更改之權利,恕不另行通知。

目錄

部件名稱	1
包裝	1
技術參數	2
安裝方法	2
快速入門指南.....	3
維護與清潔	3

部件名稱



包裝

使用前請檢查配件是否齊全。



技術參數


圖像傳感器	30萬像素
分辨率	NTSC, 510 x 496
調集範圍	1/1000手動調焦10mm到500mm
放大倍數	10~50倍, 200倍
白平衡	自動
曝光	自動
光源	白色LED燈 x 8
工作電源	AC適配器提供5V直流電
尺寸	38mm(D) x 142mm(L)

安裝方法

1. 連接電源
將適配器插入電源插口(100~240V)。



2. 將DC電源與顯微鏡的DC插口對接。

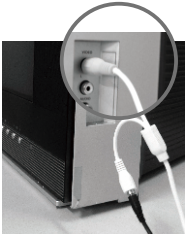

3. 連接AV線
將顯微鏡的AV連接線(黃色接口)插入電視顯示器的錄像插口。

4. 打開電視
打開電視後選擇NTSC或自動制式來錄入AV信號。



快速入門指南

調焦

將顯微鏡對準目標, 調動旋鈕到最清楚的位置。

注意:
在TV模式裏, 只能看到適時畫面, 但不能保存圖像或錄像。



維護與清潔

- 易碎產品, 請小心保管。
- 在必要的時候可用幹淨的幹布擦拭。
- 如果鏡片臟污, 清潔它時可用吹風刷或軟布蘸一點中性的清潔劑進行清潔, 要小心不要刮花鏡片表面。
- 產品不使用時, 請放回原處以避免鏡頭粘灰或受潮。